


RETRACTORES Y GANCHITOS

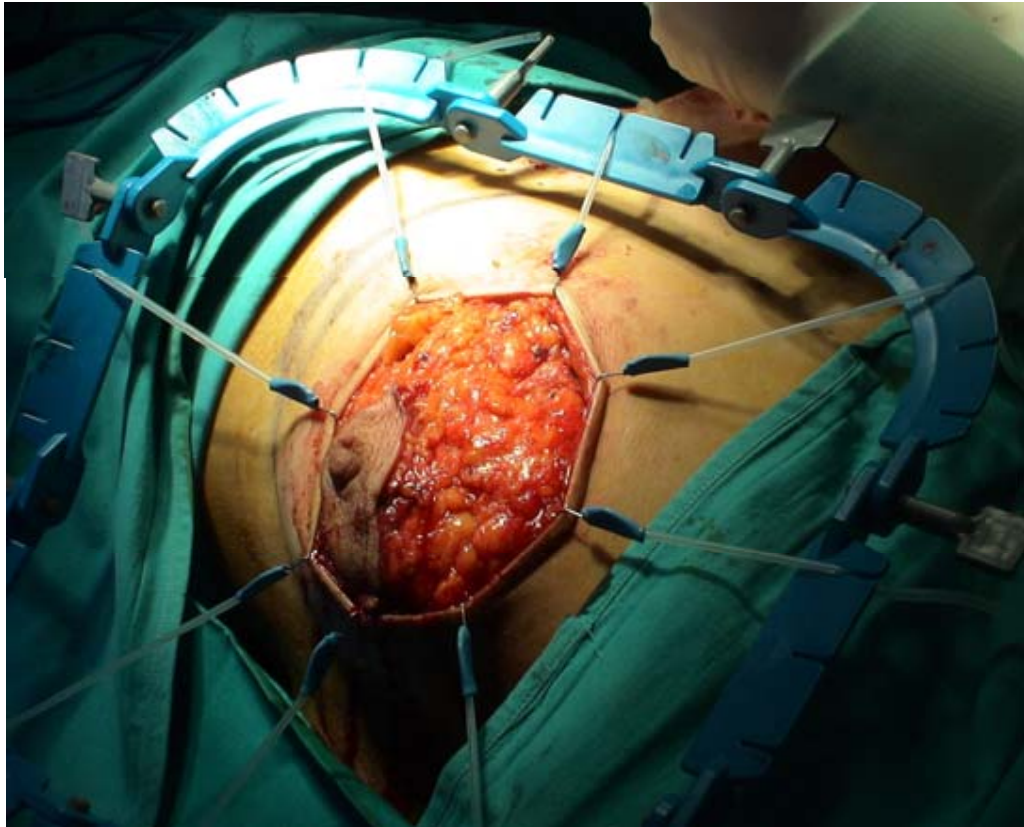

SUMSA

SUMINISTROS MEDICOS SANITARIOS, S. A.

RETRACTORES

Existen dos tipos de retractores, los retractores reutilizables y los retractores de un solo uso. Estos tienen distintas formas para cubrir innumerable tipos de cirugías. Gracias a sus bisagras laterales con rosca logran un acoplamiento anatómico seguro en la parte del paciente a intervenir. Sus aperturas periféricas facilitan la inserción segura de los ganchos y permiten obtener la tensión deseada en los tejidos.

La técnica a utilizar con los retractores es sencilla:

1º Ajustar el retractor estéril a la anatomía de la parte quirúrgica.

2º Colocar los dos primeros ganchos (uno en frente del otro) con la misma tensión para estabilizar el anillo retractor y centrarlo en la parte quirúrgica deseada.

3º Añadir los ganchos adicionales de dos en dos enfrentados.

RETRACTORES REUTILIZABLES

Retractoires fabricados en aluminio



1103

1103: 11.6 cm

Peso: 96 gramos

Uso: *Urología pediátrica*

Cirugía general pediátrica

1104: 32.2 cm x 18.4 cm

Peso: 236 gramos

Uso: *Ginecología*

Urología



1104



1107

1107: 14.5cm x 14.5cm

Peso: 206 gramos

Uso: *Cirugía general*

Cirugía de cabeza y cuello

Cirugía colon rectal

1110: 24.3cm x 24.3cm

Peso: 380 gramos

Multi-formas

Uso: *Cirugía general*



1110

Retractoires fabricados en acero inoxidable



2200

2200: 27.5 cm x 18.4 cm

Peso: 795 gramos

Uso: *Urología*

Cirugía vaginal

2201: 16.4 cm x 11.6 cm

Peso: 340 gramos

Uso: *Urología pediátrica*

Cirugía general pediátrica



2201

RETRACTORES DE UN SOLO USO

Retractor fabricados en Resina rugosa Noryl®



3301G

3301G: 26.5 cm x 11.3 cm
*Uso: Ginecología
Cirugía de cabeza y cuello*




3302G

3302G: 25.8 cm x 11.3 cm
*Uso: Urología pediátrica
Ginecología (obesos /
pelvis estrecha)*



3304G

3304G: 31.8 cm x 18.3 cm
*Uso: Ginecología
Urología*

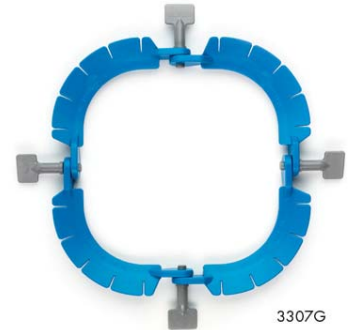

3307G

3307G: 14.1 cm x 14.1 cm
*Uso: Cirugía general
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía colon rectal*




3308G

3308G: 28.6 cm x 18.3 cm
*Uso: Ginecología
Cirugía vaginal
Urología*



3309G

3309G: 19.6 cm x 8.9 cm
*Uso: Cirugía pediátrica
Urología pediátrica
Cirugía de cabeza y cuello*

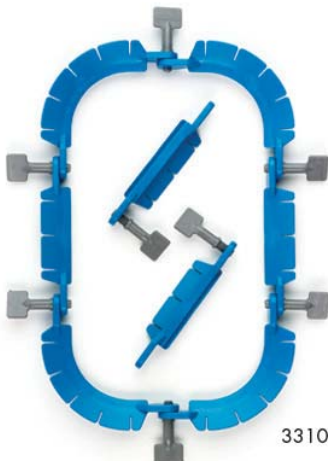

3310G

3310G: 25 cm x 25 cm (multi-formas)
*Uso: Cirugía general
Cirugía de la mano*



3715APS: 16.6 cm x 16.2 cm
*Uso: Ginecología
Cirugía vaginal*



















GANCHITOS DE UN SOLO USO

Existe una amplia gama de ganchos para cirugías de tejido profundo y de tejido superficial que se utilizan tanto con retractores reutilizables como con retractores de un solo uso.

El procedimiento de colocación de los ganchos es sencillo gracias a las aperturas periféricas que tiene el retractor que facilita la inserción de los ganchos. Además se ajustan y reajustan fácilmente obteniendo la tensión deseada.

Distintos colores para fácil identificación de los ganchos.

Empaquetado estéril. Dependiendo del modelo se sirven en paquetes de 8 y 4 unidades estériles (referencias terminadas en 8G y 4G o 4 respectivamente) y en cajas de 50 unidades esterilizadas individualmente (referencias acabadas en 1G).

5 mm Punta aguda 3311-8G 3311-1G		13 mm x 16 mm Pala terminación roma 3330-4G	
3 mm Punta aguda 3314-8G 3314-1G		13 mm Pala Spira terminación roma 3331-4G	
5 mm Punta aguda bifurcada 3325-4G		14 mm x 16 mm Pala bifurcada terminación roma 3332-4G	
7 mm Punta aguda bifurcada 3327-4G		16 mm Pala Spira bifurcada 3333-4G	
9 mm Punta aguda bifurcada 3329-4G		20 mm x 16 mm Pala cuatro bifurcaciones 3334-4G	
5 mm Punta semi-roma 3205-8G		20 mm Pala Spira tres bifurcaciones 3335-4G	
5 mm Punta roma 3316-8G 3316-1G		6,5 mm x 16 mm Pala terminación roma 3338-4G	
12 mm Punta roma 3350-8G 3350-1G 3350L-4G*		40 mm TAB-Stay 3372-2	
12 mm Punta roma bifurcada 3384-4			
12 mm Punta roma doble elástico 3550-1G			

**Modelo con elástico de 25 cm en vez de los 12 cm del elástico estándar.*